

ÆSKEN INDEHOLDER



TRYGHEDSBOKS INKL. FORUDINSTALLERET NØDBATTERI

SAMT EVT. EN ELLER FLERE BÆRBARE TRYGHEDSALARMER
SÅFREMT DISSE ER BLEVET TILVALGT VED BESTILLING



STRØMSTIK



BRUGERVEJLEDNING

Der er mulighed for at tilkoble følgende bærbare Tryghedsalarmer til din boks:

- Bærbar Tryghedsalarm til armen
- Bærbar Tryghedsalarm med faldsensor
- Bærbar Tryghedsalarm med tale

Ring og hør nærmere på 32 31 60 50



CEKURA.dk

Tryghed for dig – og dine nærmeste

Kontakt os hele døgnet på 32 31 60 50

CEKURA A/S · Amagerbrogade 41 · 2300 København S · Tlf: 32 31 60 50 · www.cekura.dk

CEKURA Tryghedsalarm

Tryghedsboks (GSM)
- BRUGERVEJLEDNING



CEKURA.dk
Tryghed for dig – og dine nærmeste

TILLYKKE MED DIN CEKURA TRYGHEDSALARM

CEKURA Tryghedsalarm er din sikkerhed og tryghed når du befinder dig i hjemmet. Tryghedsalarmen virker overalt i dit hjem. Tryghedsboksen har et forudinstalleret nød batteri, således at du altid vil kunne kontakte os, også selvom der måtte forekomme udfald på strømmen.

Vi har her lavet en kort brugervejledning til dig, så du kan lære din CEKURA Tryghedsalarm meget bedre at kende. Hvis du har nogen spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Vi håber du bliver glad for din CEKURA Tryghedsalarm og vores Tryghedsservice.

Med venlig hilsen
CEKURA Tryghedscenter

KOM GODT I GANG

1. OPSÆTNING

Din CEKURA Tryghedsalarm er allerede klargjort før afsendelse fra Tryghedscentret, så det eneste du skal foretage dig, er at sætte det medfølgende strømstik i Tryghedsboksen og tilslutte nød batteriet (for mere information henvises til afsnit 4) – og efter ca. 2 minutter er den klar til brug.

2. DIN FØRSTE ALARM


Når Tryghedsboksen er tilsluttet strøm, er det tid til at teste din CEKURA Tryghedsalarm. For at foretage et alarmopkald skal du trykke en enkelt gang på den blå knap på din bærbare Tryghedsalarm eller på den røde knap på boksen.

Procedure for alarmforløbet:

1. Straks efter tryk på knappen vil du hører biptoner fra Tryghedsboksen og den røde "hjælp" knap vil begynde at lyse kraftigt og konstant
2. Indenfor ca. 20-30 sekunder vil du være i direkte kontakt med Tryghedscentret
3. Tryghedscentret vil afslutte samtalen
4. Du kan nu aktivere din alarm igen

3. TRYGHEDSBOKSENS DELE OG LYS (FORSIDE)

1. Statuslampe (grøn)
 - Konstant: Strøm tilsluttet
 - Blink: Problemer med strøm/lavt batteri
2. Statuslampe (rød)
 - Konstant: Rapportering til Tryghedscentret i gang
3. Programmeringsknap
 - Bruges kun efter vejledning fra Tryghedscentret
4. Rød hjælp knap (baggrundslys)
 - Konstant (svagt): Klar til brug og rapportering til Tryghedscentret
 - Konstant (kraftigt): Rapportering til Tryghedscentret i gang

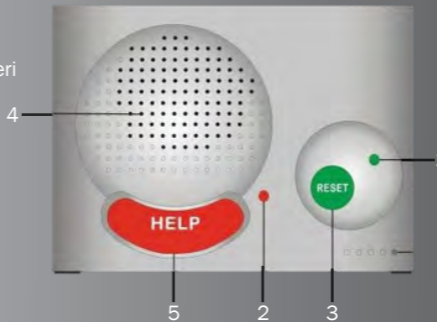

5. Mikrofon

6. Højtaler

4. TRYGHEDSBOKSENS DELE OG LYSE (BAGSIDE)

7. Simkort holder
 - Ved modtagelse sidder der allerede et fungerende simkort i holderen
8. Nulstillingsknap
 - Holdes nede 1 sekund for at genstarte simkortet
9. Statuslampe (rød)
 - Blinkende: Alt fungere som det skal og der er signal på simkortet
10. Statuslampe (gul)
 - Blinkende: Signalfejl/problemer med simkortet
11. Indgang til strømforsyning
12. Tænd/sluk knap til nød batteriet
 - Skal altid være tændt
 - Ved strømsvigt holder batteriet Tryghedsboksen kørende i op til 36 timer
13. Kun til CEKURAs brug

